

CAPP Origami

RE AGENT RE SER VOIR S



Doblar, verter y pipetear...

El **CAPP Origami™** representa una forma innovadora de pensar en lo que se refiere a depósitos de reactivos.

La forma en V perfecta maximiza la recuperación completa de todos los reactivos

La forma del depósito, junto con la rigidez del material utilizado, garantiza que el depósito forme una V afilada en la parte inferior. Esto facilita el pipeteado y le permite ahorrar reactivos, ya que sólo tiene que verter la cantidad necesaria en el depósito.

Su diseño plegable ahorra espacio al guardarlo

Los depósitos **CAPP Origami™** se emban en forma de láminas planas, lo que significa que ocupan mucho menos espacio en el almacén.


Fácil de usar

Para utilizar un depósito **CAPP Origami™** basta con levantarlo empujando los lados para juntarlos. Esto es muy fácil gracias a las líneas previamente plegadas. En cuanto el depósito **CAPP Origami™** adquiera la forma adecuada, podrá verter líquido y empezar a pipetear directamente. Los pliegues y el material de polipropileno garantizan que los depósitos se mantengan en posición vertical una vez plegados en la forma correcta.


Llevamos el pipeteado a la perfección.



Take flat reservoir from pack

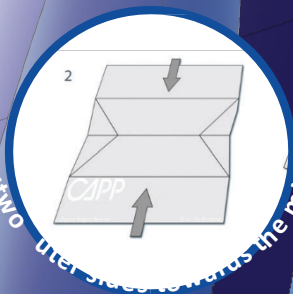

Push two outer sides towards the middle

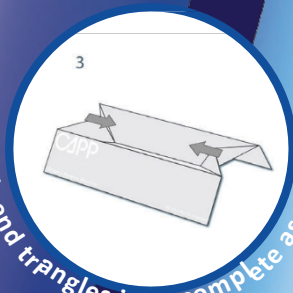

Push end triangles in to complete assembly

Información para pedidos

Ref. No.	Descripción
CA40505	CAPPOrigami 30mL (pipetas de 8 y 16 canales), bolsa c/ 50 uds.
CA40506	CAPPOrigami 30mL (pipetas de 8 y 16 canales), Pre-estéril, 10 bolsas c/ 5 uds. c/u CA40510
	CAPPOrigami 40mL (pipetas de 12 canales), bolsa c/ 50 uds.
CA40511	CAPPOrigami 40mL (pipetas de 12 canales), Pre-estéril, 10 bolsas con 5 unidades cada una

Pipetas multicanal *CAPPAero 96*

Ref. No.	Descripción	Inexactitud	Imprecisión	Color
C10-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 0,5-10µL	5.00.00	3.60 /1.00	○
C20-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 2-20µL	5.00.00	3.60 /1.00	●
C50-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-8	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 8 canales, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●
C10-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 0,5-10µL	5.00.00	3.60 /1.00	○
C20-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 2-20µL	5.00.00	3.60 /1.00	●
C50-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 5-50µL	3.20 /1.40	1.60 /0.60	●
C100-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 10-100µL	2.50 /1.30	1.20 /0.50	●
C200-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 20-200µL	1.80 /1.20	0.80 /0.40	●
C300-12	CAPPAero 96 pipetas múltiples, 12 canales, 30-300µL	1.66 /1.40	0.60 /0.30	●



Uthleber Weg 14
99734 Nordhausen Alemania
Tel. +49 (0) 3631 65242-0
Fax. +49 (0) 3631 65242-90
info@ahn-bio.com
www.ahn-bio.com
V. 2024-12

Distribuido por:

